

# MODULO DI RICHIESTA ESAME PRENATALSAFE

## MEDICO / CENTRO INVIANTE



Nome / Timbro

## DATI DELLA GESTANTE

Prot. No.: \_\_\_\_\_ (uso interno)  
 Nome \_\_\_\_\_  
 Cognome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 CAP: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_ Data del prelievo: \_\_\_\_\_  
 Sta ripetendo questo prelievo per la seconda volta?  SI;  NO

## DATI GRAVIDANZA

Settimana di gravidanza \_\_\_\_\_ + giorni \_\_\_\_\_  
 Età gestazionale determinata mediante:  
 Ecografia;  Ultime Mestruazioni;  Trattamento PMA  
 Gravidanza gemellare?  NO  SI; ( Monocoriale;  Bicoriale)  
 Gravidanza da procreazione assistita?  NO;  SI;  
 Tipo di fecondazione:  Omologa  Eterologa Maschile  
 Eterologa femminile  Embriodonazione  
 Ginecologo di fiducia: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo e Città: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

## TIPO DI TEST DA ESEGUIRE

- PrenatalSAFE® 3 (21,13,18);  
 PrenatalSAFE® 5 (21,13,18,X,Y);  
 PrenatalSAFE® Plus (21,13,18,X,Y +  
 Pannello Microdelezioni  
 Pannello Microdelezioni + Trisomie 9 e 16)  
 PrenatalSAFE® Karyo (esame non invasivo del cariotipo fetale)  
 PrenatalSAFE® Karyo Plus (esame non invasivo del cariotipo fetale + Pannello 9 Microdelezioni)  
 PrenatalSAFE® COMPLETE (PrenatalSAFE® Karyo + GeneSAFE™ COMPLETE)  
 PrenatalSAFE® COMPLETE Plus (PrenatalSAFE® Karyo Plus + GeneSAFE™ COMPLETE)  
 Si vuole conoscere il sesso del feto?  SI;  NO  
 Test Standard  Protocollo FAST

Integrazione RhSafe®?  SI;  NO

(gratuita e applicabile solo in gravidanze con gestante Rh negativa e partner Rh positivo; è necessario produrre referti attestanti il fattore Rh della coppia).

### Richiesta di esami aggiuntivi (opzionali):

- Cariotipo su sangue periferico partner Maschile  
 Cariotipo su sangue periferico partner Femminile  
 Pannello malattie genetiche partner Femminile (Fibrosi Cistica 34 mut. + Sordità Ereditaria + Atrofia Muscolare Spinale (SMA) + X-Fragile)  
 Pannello malattie genetiche partner Maschile (Fibrosi Cistica 34 mut. + Sordità Ereditaria - principali mut. + Atrofia Muscolare Spinale -SMA)  
 GeneScreen® (screening genetico multiplo di 700 malattie ereditarie)  
 RhSafe® (determinazione del fattore Rh fetale)  Altro: \_\_\_\_\_

## INDICAZIONE ALL'ESAME

- Età Materna Avanzata;  Età Paterna Avanzata;  Ansietà  
 Anomalie fetali o riscontri ecografici patologici/dubbi:  
 Tipo riscontro ecografico: \_\_\_\_\_  
 Precedente gravidanza con aneuploidia;  
 Screening 1^ trimestre (Bi-Test) positivo;  
 Partner portatore di malattia genetica:  Femminile;  Maschile  
 Specificare malattia \_\_\_\_\_  
 Specificare mutazione e gene: \_\_\_\_\_  
 Altro \_\_\_\_\_  Nessuna specifica indicazione  
 La gestante sta assumendo farmaci?  SI;  NO  
 Indicare nome farmaco: \_\_\_\_\_

## DATI DEL PARTNER MASCHILE

Da compilare solo se vengono richiesti esami genetici per il partner maschile:

Nome \_\_\_\_\_  
 Cognome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_

## MODALITA' DI FATTURAZIONE

- MEDICO / CENTRO INVIANTE  
 PAZIENTE (annotare il codice fiscale nell' anagrafica della gestante)



## MODALITA' DI REFERTAZIONE

MEDICO / CENTRO INVIANTE

PAZIENTE

- E-mail, all'indirizzo \_\_\_\_\_  
 On-Line;  Posta

Per attivare la refertazione online al paziente è obbligatorio fornire una username e password da indicare di seguito:

Username: indirizzo e-mail del paziente

Password: \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

autorizzo ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003 l'invio del referto nelle modalità sopra indicate.

FIRMA \_\_\_\_\_




## Istruzioni per il prelievo, il confezionamento e la spedizione dei campioni biologici

### Consenso informato e modulo di richiesta esame

**IMPORTANTE:** compilare accuratamente, in ogni sua parte, il **modulo di richiesta informazioni** (vedi retro) e fare firmare alla gestante il **modulo di consenso informato** che troverete all'interno del contenitore di trasporto, al fine di evitare ritardi e garantire i tempi di consegna. Accludere i suddetti moduli ai campioni da inviare al ns. laboratorio. Verificare che Nome, Cognome e data di nascita della gestante trascritti sul modulo siano gli stessi di quelli presenti sulle etichette delle provette.

### Prelievo dei campioni :

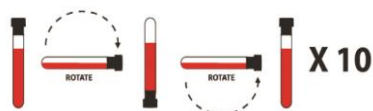

- Prendere la **provetta** fornita con il contenitore di trasporto **PrenatalSafe®**.
- Trascrivere la **data del prelievo** nell'apposito campo del modulo di richiesta esame;
- Trascrivere il **Cognome** e **Nome** della gestante, e la **data di nascita** sull'etichetta della provetta;
- Prelevare circa **10 ml** (minimo 8 ml) di sangue periferico e inserire il campione biologico all'interno della **provetta da 10ml** fornita con il contenitore di trasporto, (attenzione non riempire la provetta completamente, al fine di evitare l'apertura accidentale del tappo).
- **Agitare** la provetta **10 volte**;
- Sigillare il tappo della provetta, avvolgendolo con il foglio di **Parafilm** in dotazione.

Mantenere la provetta a **temperatura ambiente** o **in frigo** a **+4°C** fino alla spedizione. **Non conservare le provette in freezer (-20°C)!** Nel periodo estivo il kit potrà essere fornito con un gel in busta che dovrà avvolgere la provetta di sangue. Tale gel ha la funzione di mantenere la provetta a temperatura costante (2-8°C), evitando le variazioni di temperatura. Il gel in busta non necessità di essere posto in congelatore.

### Confezionamento e spedizione:

Per l'invio al Laboratorio, i campioni biologici devono essere imballati utilizzando il nostro **Contenitore di Trasporto**, assemblato a norma **UN3373** (conforme alla normativa europea di trasporto dei campioni biologici). Il Contenitore comprende:

1. Un **Contenitore Secondario** cilindrico di plastica, di colore rosso, con tappo di plastica di colore grigio;
2. Un **Contenitore porta provette** (da introdurre internamente al contenitore secondario) in materiale spugnoso con nr. 14 alloggiamenti per provette.
3. Una **Scatola di trasporto** in cartone, riportante il logo del test **PrenatalSafe®**, con la sigla UN3373 stampata in un lato.
4. Il **Modulo di richiesta esame**.
5. il **Modulo di consenso informato**.
6. Una **Busta in plastica del Corriere Espresso**, da utilizzare per inserire al suo interno il contenitore di trasporto dei campioni biologici.

- Inserire la **provetta di sangue** all'interno nel **contenitore cilindrico di plastica rosso**, ponendola in uno degli alloggiamenti del contenitore porta provette in materiale spugnoso.
- Chiudere il contenitore cilindrico tramite il relativo **tappo di plastica grigio**;
- Introdurre il suddetto recipiente nella **scatola di trasporto in cartone** riportante il logo del test **PrenatalSafe®**;
- Controllare che il **modulo di richiesta esame** ed il **consenso informato** siano stati compilati e debitamente firmati, ed inserire i suddetti documenti all'interno della scatola di trasporto, tra contenitore secondario e cartone;
- Chiudere la scatola di trasporto e porla all'interno della **busta di plastica del Corriere Espresso**;
- **Richiedere il ritiro** presso la Vs. Sede della busta contenente i campioni biologici secondo la procedura di seguito descritta:
  - ❖ Telefonare chiamando il numero **+39 068811270** o in **Numero Verde 800.501.651**, digitando successivamente l'**opzione 1**, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oppure inviare una **e-mail** all'indirizzo **logistica@laboratoriogenoma.it**;
  - ❖ Uno staff totalmente dedicato avrà il compito di prendere nota della Sua richiesta di ritiro dei campioni biologici, evitando le eventuali attese per eseguire la prenotazione telefonica tramite il call center del corriere espresso.
  - ❖ Successivamente, il nostro personale sceglierà il servizio di corriere espresso più efficiente rispetto alla specifica zona geografica e prenoterà per Lei il ritiro dei campioni presso la Sua sede.

**IMPORTANTE:** Il kit deve essere mantenuto a temperatura ambiente o in frigo a +4°C. Dopo il prelievo il campione deve essere spedito prima possibile, preferibilmente entro 48h, ed arrivare in laboratorio non oltre 5 gg. dal giorno del prelievo. Il Ns. Ufficio Assistenza Clienti è a Vs. disposizione al Numero Verde 800.501.651 per fornire assistenza sulle procedure di prelievo, conservazione e spedizione dei campioni.